



Waarom moet ik mijn hoortoestel reinigen?

Om een goede werking van uw hoortoestel te garanderen, is **regelmatige reiniging noodzakelijk**. Doordat uw huid zweet en uw oren oorsmeer aanmaken, kunnen uw **microfoons en luidsprekers verstoppt** raken. Ook kan wat verhard oorsmeer voor jeuk of irritatie zorgen. U reinigt best **wekelijks** de buitenkant van uw hoortoestel. Gelukkig kan dat al in enkele simpele stappen!

Beter horen begint bij een luisterend oor



Hoorexpert Brugge

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-wo: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.


AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.



Hoorexpert Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 3, 8020 Oostkamp
T 050 17 01 78 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be

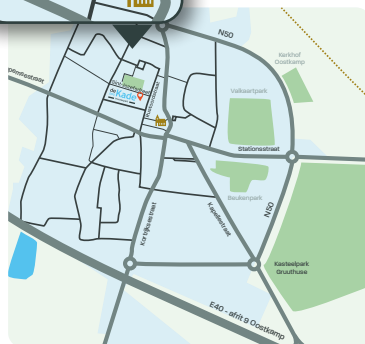

OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-vr: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma: 8-12 u. / 13-19 u.
di: 8-12 u. / 13-19 u.
wo: 8-12 u. / 13-17 u.
do: 8-12 u. / 14-17 u.
vr: 8-12 u. / 13-17 u.
za: 8-12 u.

De openingsuren kunnen afwijken tijdens de schoolvakanties.



Afspraak maken?
050 33 62 29 / 050 17 01 78
hoorexpert@de-kade.be
[hoorexpertdekade.be](http://www.hoorexpertdekade.be)

deKade
Hoorexpert

Hoe reinig ik mijn IHO-hoortoestel ?





IHO-toestel

Een IHO (in-het-oor)-toestel is een hoortoestel dat **deels in de gehoorgang** zit en waarbij **geen onderdelen achter het oor** hangen. Dit hoortoestel wordt vaak op maat van de gehoorgang gemaakt. Doorloop volgende stappen:

Stap 1: toestel reinigen




Reinig de buitenkant van uw hoortoestel met een **zacht doekje** waar u wat **reinigingsspray** op spuit of met een reinigingsdoekje. Kuis de microfoons, de kleine openingen aan de zijkant van uw hoortoestel, door deze zachtjes te borstelen. Wrijf niet te hard aangezien dit de microfoons zou kunnen beschadigen.



Stap 2: filter vervangen

Vervang de witte filter in uw luidspreker. U controleert best **wekelijks** of deze filters moeten vervangen worden. Afhankelijk van **oorsmeerproductie, zweet, stof of vocht** zal u uw filter vaker of minder vaak moeten vervangen. Wanneer u minder begint te horen of ziet dat filter verstopt is, is het tijd om deze te vervangen.

Deze **Cerustopfilters** zijn staafjes in een doosje. Neem een staafje eruit en prik met de lege kant de oude filter uit het hoortoestel. Trek het staafje vervolgens los.

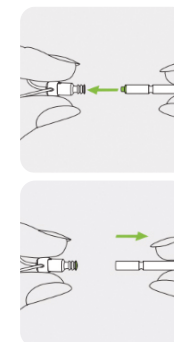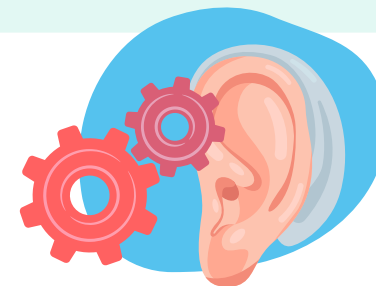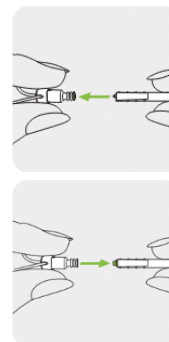

Daarna draait u het staafje om en klikt u met de andere zijde de nieuwe filter er in. Trek het staafje los en gooi dit in de vuilbak. De nieuwe filter is geplaatst.

Stap 3: ventilatiekanaal

Reinig het **ventilatiekanaal** van uw toestel. Dit is het verluchtungskanaal naast uw filter. Met een fijne cerumenstick kan u door dit kanaal prikken om zo eventuele oorsmeerophoping te verwijderen.

Extra stap

Indien u een hevige zweter bent, kan het geen kwaad om uw hoortoestel af en toe in een **droogdoos** te plaatsen met een oranje **droogtablet**. Sluit vervolgens de droogdoos goed af. Verliest de droogtablet zijn kleur, dan moet deze vervangen worden.

