



Waarom moet ik mijn hoortoestel reinigen?

Om een goede werking van uw hoortoestel te garanderen, is **regelmatige reiniging noodzakelijk**. Doordat uw huid zweet en uw oren oorsmeer aanmaken, kunnen uw **microfoons en luidsprekers verstopt** raken. Ook kan wat verhard oorsmeer voor jeuk of irritatie zorgen. U reinigt best **wekelijks** de buitenkant van uw hoortoestel. Gelukkig kan dat al in enkele simpele stappen!

Beter horen begint bij een luisterend oor



Hoorexpert Brugge

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-wo: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.


AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.



Hoorexpert Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 3, 8020 Oostkamp
T 050 17 01 78 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be

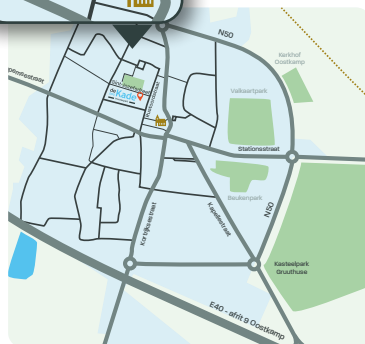

OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-vr: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma: 8-12 u. / 13-19 u.
di: 8-12 u. / 13-19 u.
wo: 8-12 u. / 13-17 u.
do: 8-12 u. / 14-17 u.
vr: 8-12 u. / 13-17 u.
za: 8-12 u.

De openingsuren kunnen afwijken tijdens de schoolvakanties.



050 33 62 29 / 050 17 01 78

hoorexpert@de-kade.be
[hoorexpertdekade.be](http://www.hoorexpertdekade.be)

de Kade
Hoorexpert

Hoe reinig ik mijn **RIC-hoortoestel** ?





RIC-toestel

Een RIC (receiver-in-canal/**luidspreker-in-het-oor**)-toestel bestaat uit een **hoortoestel met een fijn draadje** dat loopt naar een zacht plastieken dopje of stukje-op-maat in de gehoorgang. Doorloop volgende stappen:

Stap 1: toestel reinigen






Reinig de buitenkant van uw hoortoestel of stukje-op-maat met een **zacht doekje** waar u wat **reinigingspray** op spuit of met een reinigingsdoekje. Kuis de microfoons (de kleine openingen aan de zij-/bovenkant van uw hoortoestel) door deze zachtjes te borstelen.



Bij een **stukje-op-maat** reinigt u dan het ventilatiekanaal naast uw filter om oorsmeer te verwijderen. Dat doet u aan de hand van een **cerumenstick** die u door het kanaaltje duwt. Dit garandeert een goede verluchting van het oor.

Stap 2: filter vervangen

Vervang vervolgens de filter in uw luidspreker. Indien een plastieken dopje op uw luidspreker zit, moet u dit eerst losmaken. U controleert best **wekelijks** of deze filters moeten vervangen worden. Wanneer u minder begint te horen of als u ziet dat de filter verstopt zit, is het tijd om de filter te vervangen. U heeft een Cerustopfilter.

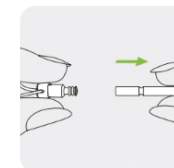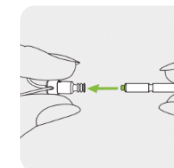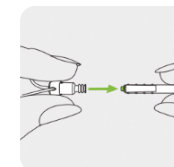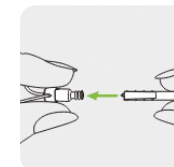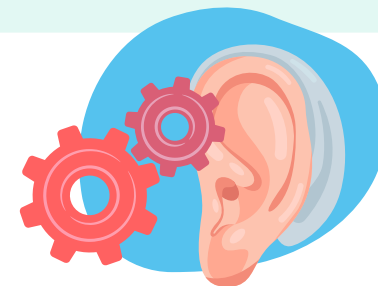

Deze filters zijn staafjes die in een grijs doosje zitten. Neem een staafje eruit en prik met de lege kant de oude filter uit het hoortoestel. Trek het staafje vervolgens los. Daarna draait u het staafje om en klikt u met de andere zijde de nieuwe filter er in. Trek het staafje los en gooi dit in de vuilbak. De nieuwe filter is geplaatst. Maak vervolgens het plastieken dopje vast.

Extra stap

Indien u een hevige zweter bent, kan het geen kwaad om uw hoortoestel af en toe in een **droogdoos** te plaatsen met een oranje **droogtablet**. Sluit vervolgens de droogdoos goed af. Verliest de droogtablet zijn kleur, dan moet deze vervangen worden.