



Waarom moet ik mijn hoortoestel reinigen?

Om een goede werking van uw hoortoestel te garanderen, is **regelmatige reiniging noodzakelijk**. Doordat uw huid zweet en uw oren oorsmeer aanmaken, kunnen uw **microfoons en luidsprekers verstoppt** raken. Ook kan wat verhard oorsmeer voor jeuk of irritatie zorgen. U reinigt best **wekelijks** de buitenkant van uw hoortoestel. Gelukkig kan dat al in enkele simpele stappen!

Beter horen begint bij een luisterend oor



Hoorexpert Brugge

Ruddershove 6, 8000 Brugge
T 050 33 62 29 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-w: 9-12 u. / 13-17 u.
do: 9-12 u. / 15-17 u.
vr: 9-12 u. / 13-16 u.
za: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma-vr: 8-12 u. / 13-19 u.
za: 8-12 u.



Hoorexpert Oostkamp

Sint-Jozefsdreef 3, 8020 Oostkamp
T 050 17 01 78 | hoorexpert@de-kade.be
www.hoorexpertdekade.be



OPENINGSUREN ONTHAAL

ma-vr: 9-12 u.

AFSPRAAKMOMENTEN AUDIOLOOG

ma: 8-12 u. / 13-19 u.
di: 8-12 u. / 13-19 u.
wo: 8-12 u. / 13-17 u.
do: 8-12 u. / 14-17 u.
vr: 8-12 u. / 13-17 u.
za: 8-12 u.


De openingsuren kunnen afwijken tijdens de schoolvakanties.



Afspraak maken?
050 33 62 29 / 050 17 01 78
hoorexpert@de-kade.be
[hoorexpertdekade.be](http://www.hoorexpertdekade.be)

de Kade
Hoorexpert

Hoe reinig ik mijn RIC-hoortoestel ?

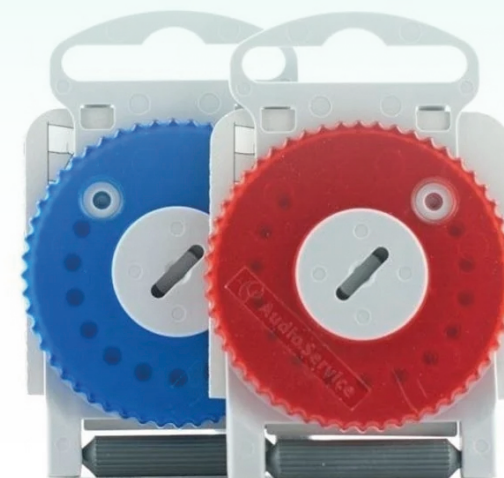




RIC-toestel

Een RIC (receiver-in-canal/**luidspreker-in-het-oor**)-toestel bestaat uit een **hoortoestel met een fijn draadje** dat loopt naar een stukje op maat in de gehoorgang. Doorloop volgende stappen:

Stap 1: toestel reinigen

Reinig de buitenkant van uw hoortoestel of stukje-op-maat met een **zacht doekje** waar u wat **reinigingspray** op spuit of met een reinigingsdoekje. Kuis de microfoons (de kleine openingen aan de zij-/bovenkant van uw hoortoestel) door deze zachtjes te borstelen.

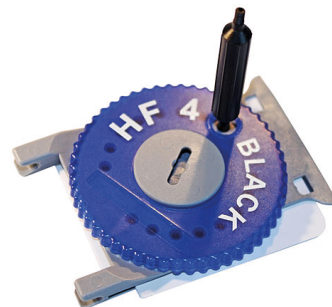


Bij uw stukje-op-maat reinigt u het **ventilatiekanaal** naast uw filter om oorsmeer te verwijderen. Dat doet u aan de hand van een **cerumenstick** die u door het kanaaltje duwt. Dit garandeert een goede verluchting van het oor.


Stap 2: filter vervangen

Vervang vervolgens de filter in uw luidspreker. U controleert best wekelijks of deze filters moeten worden vervangen. Wanneer u minder begint te horen of als u ziet dat de filter verstopt zit, is het tijd om de filter te vervangen.


U heeft een: • **HF3-filter**
• **HF4-filter**

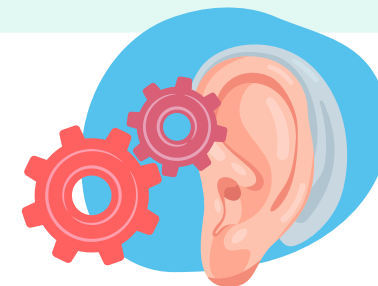


Deze filters kan u vervangen met het bijhorende staafje.

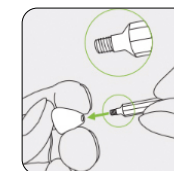

Draai met de schroefkant de oude filter uit uw oorstuk en werp deze in de vuilbak.

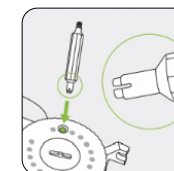

Met de andere kant van het staafje (klik-systeem) neemt u een nieuwe filter uit het schijfje door het staafje er in te klikken.

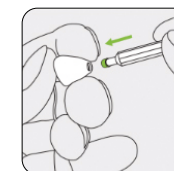

Trek de nieuwe filter omhoog en klik hem vervolgens in het oorstuk. Verwijder nu

het staafje met een enigszins schuine hoek.

Extra stap

Indien u een hevige zweter bent, kan het geen kwaad om uw hoortoestel af en toe in een **droogdoos** te plaatsen met een oranje **droogtablet**. Sluit vervolgens de droogdoos goed af. Verliest de droogtablet zijn kleur, dan moet deze vervangen worden.